

## Advanced Anti-aging RF Technology

**Secret<sup>™</sup>** ist ein fraktioniertes Mikronadel System, das die Möglichkeiten und **Grenzen des fraktionierten Lasers deutlich überschreitet.**

Es ist ein System für umfangreiche Hautstrukturverbesserung, basierend sowohl auf **bipolarer als auch auf monopolarer Radiofrequenz.**

Eine **exakte Einstellung der Tiefe der Mikronadeln** und das "kalte" Passieren der Epidermis ermöglichen die **Energieabgabe direkt in der Zielschicht.**

# Secret<sup>RF</sup>

## Micro-Needle Fractional RF System

### Indications

#### Face Treatment


- Faltenreduktion
- Porenverkleinerung
- Hautverjüngung
- Nichtoperatives Facelifting
- Straffung der erschlafften Haut
- Aknenarben & Windpockennarb

#### Body Treatment


- Narben und Dehnungsstreifen




### Histological evidence

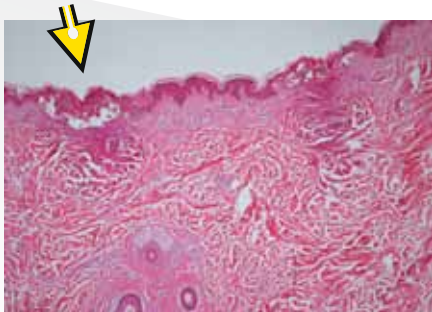

Der Laserstahl wird von der Epidermis absorbiert. Es findet nur eine sehr oberflächliche Koagulation statt.

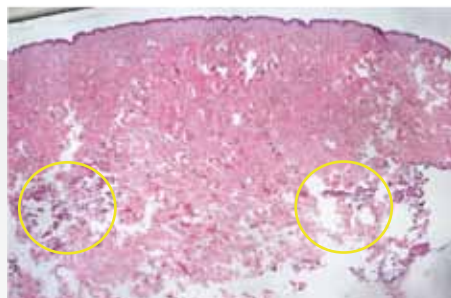

Die Mikronadeln passieren die Epidermis ohne sichtbaren Schaden. Es findet bereits am Folgetag eine Kollagenaturierung statt.

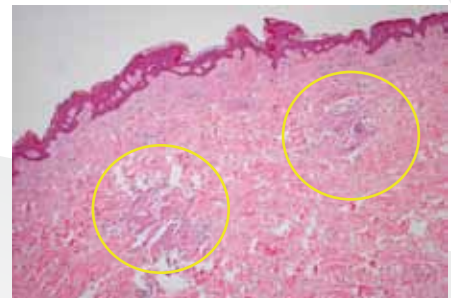

RF-Secret: Bereits nach 2 Wochen ist der Prozess der Neokollagenese ersichtlich.



# Die Vorzüge des Secret<sup>RF</sup>

## Micro-Needle Fractional RF System

### Individuelle und präzise Behandlung.

Die Tiefe der Einführung der Nadeln ist von 0,5 mm bis 3,5 mm einstellbar in 0,1 mm Schritten.


### Vielseitige Behandlung.

Die einstellbare Intensität der RF-Energie von 0 bis 100 Level (Low zu High Power) und Impulsdauer von 50 bis 950 ms ermöglicht die Durchführung der Behandlung an verschiedenen Körperarealen.

### Ganzheitliches Konzept der Gesichtsbehandlung.

Die Konzentration der RF-Energie an der Spitze der Nadel ist eine NEUE TECHNOLOGIE. Sie erlaubt dem Therapeut eine präzise Bestimmung der Behandlungstiefe im Gegensatz zum Laser, der alle Hautschichten beeinträchtigt.


Der optionale Monopolare Modus rundet die Behandlung ab, sorgt für das Einschleusen von aktiven Wirksubstanzen in die gebildeten Hautkanäle und erzielt somit einen Sofort-Straffungseffekt.

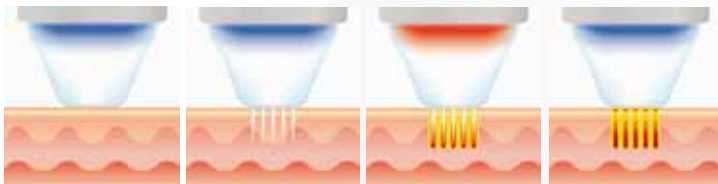


### Verschiedene Indikationen und hervorragende Wirkung.

Abgabe der Energie direkt in der Zielschicht, mit vorherigem "kalten" Passieren der Basalmembran, ermöglicht die Aktivierung körpereigener Mechanismen zur Hauterneuerung. Es kann angenommen werden, dass eine Kaskade von Wachstumsfaktoren ausgeschüttet wird sowie die Fibroblasten und Elastin sekretierenden Zellen stimuliert werden.


## How Secret works?

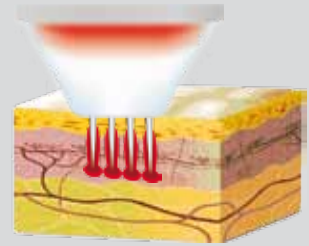

## Benefits of Micro-needle Fractional RF

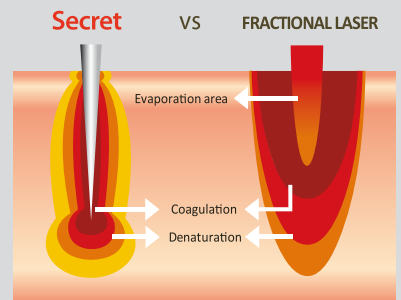

## Ideal distance for uniform thermolysis

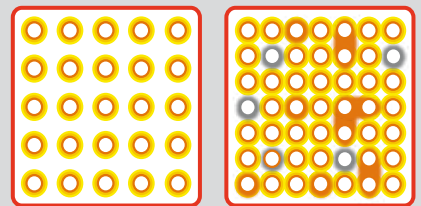

Secret vs Others

## Light variation for precise treatment



Ready to treat



Begin to emit RF energy

## Mono polar RF handle

